



成爲更好的自己

掃描下方二維碼下載Achedaway應用程式



IOS



Android



在Apple App Store或
Google Play上搜尋
IOS Android "Achedaway"

使用手冊

拔罐更智能，康復更快速。


ACHEDAWAY 智能拔罐按摩器

Achedaway智能拔罐按摩器是一款多功能動態拔罐按摩器，結合先進科技與傳統醫學，將動態拔罐、智能按摩和紅光療法集於一身。

這種創新的組合使Achedaway智能拔罐按摩器可以用於緩解疼痛、減少炎症，另外在促進血液循環和增強個人免疫力方面亦具有無可置疑的效果。

Achedaway智能拔罐按摩器也可以搭配乳液一起使用，以獲得更好的按摩體驗。

無論在家裡、辦公室還是外出，Achedaway智能拔罐按摩器都提供了一種極為便捷的方式，讓您可以隨時隨地享受拔罐。

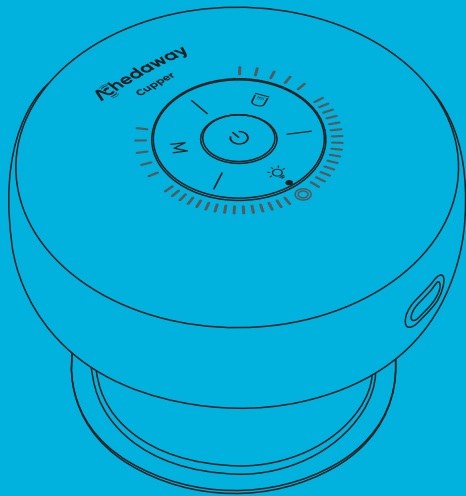


規格參數

重量:	0.44磅 / 200克
尺寸:	5瓦
充電電壓:	3.7 x 3.7 x 2.83 英寸
抽吸強度:	5V - 2A
充電時間:	- 60 ~ 0 kPa
波長:	2.5 小時
額定功率:	630 - 670 納米
電池容量:	3.7V / 1800mAh


拔罐更智能，
康復更快速。



01 | 產品結構

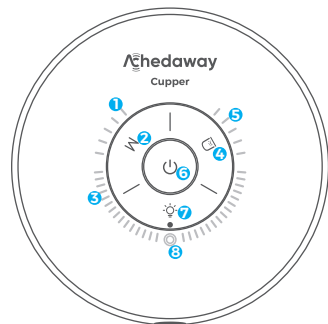

- 1 抽吸模式指示
- 2 抽吸模式控制
- 3 抽吸運行燈
- 4 強度控制
- 5 強度指示
- 6 電源按鈕
- 7 紅光控制
- 8 充電指示

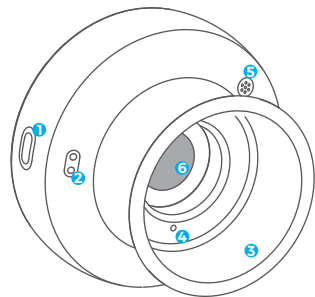

- 1 充電口
- 2 掛繩孔
- 3 塑膠拔罐杯
- 4 進氣口
- 5 排氣口
- 6 紅光區



動態拔罐技術

智能拔罐按摩器的動態吸力勝於其他拔罐設備。其抽吸和釋壓交替進行，在促進血液循環的同時，加速身體恢復過程。



紅光治療

紅光有助於緩解疼痛和炎症，從而產生更有效的治療效果。身體部分在紅光的照射下，亦能更快地修復皮膚和肌肉組織，帶來更好的放鬆效果。



智能按摩

智能拔罐按摩器提供5種不同的抽吸模式和5種強度級別，可根據個人需求定制按摩，並可即時調節真空吸力，獲得動態舒適的按摩體驗。

02 | 操作指南

使用前

- 先閱讀防範說明。如不合適，請勿使用本產品。
- 使用前和使用後用濕布清潔產品。可用乳液或凝膠滋潤皮膚，獲得更舒適的體驗。
- 使用前請將拔罐杯擰緊至機器上，並檢查機器是否能正常運行。
- 使用時請系上掛繩，避免掉落和損壞。

電源按鈕

- 長按電源按鈕開/關機。
- 默認開啟負壓抽吸。按下按鈕即可暫停/繼續。
- 連續工作12分鐘後自動關機。


紅光控制

- 按下按鈕可開啟/關閉紅光治療功能。
- 預設模式下，紅光功能是有沒有啟動的（燈照區域以藍色顯示）。
- 一旦拔罐杯吸附著在皮膚上，紅光指示燈就會自動亮起。

抽吸控制

- 按M鍵可切換5種不同的抽吸模式，由不同的LED燈指示。
- 抽吸運行燈閃爍，顯示抽吸動作。

M1-喚醒模式 M2-放鬆模式 M3-按摩模式 M4-專業模式 M5-強力模式

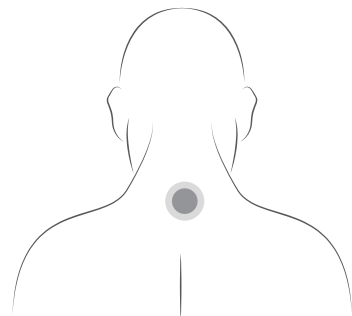


強度控制

- 開機預設為1級強度模式。
- 按下控制按鈕可自行調節1級至5級抽吸強度。
- 指示燈顯示當前相應的強度等級。

使用乳液或按摩油

請均勻地塗抹乳液，直到皮膚上沒有多餘乳液，然後將儀器固定在所需位置上。

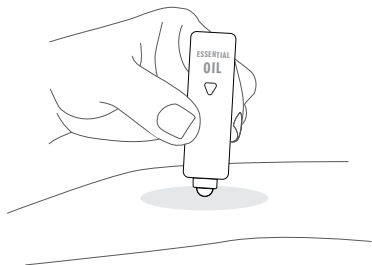

塗抹乳液或按摩油


請注意：銷售方恕不負責因液體產品使用不當而造成的氣泵損壞。

過濾棉

過濾棉用作阻擋隔大部分顆粒或液體雜質，以維持儀器內部清潔和維護。請根據使用頻率檢查並更換。


第一步：把拔罐杯旋擰下來。

第二步：換一個新的棉片，擰回拔罐杯。

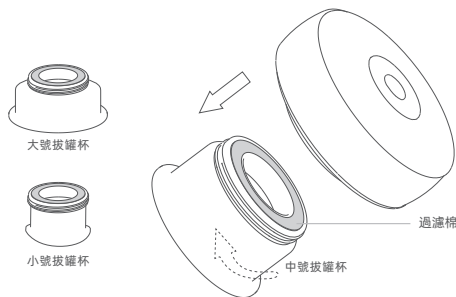

掛繩

請系上掛繩，在使用時將其套在手上，以免產品意外掉落損壞。

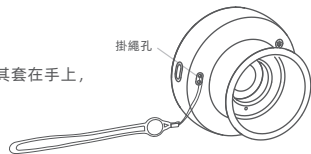


03 | Achedaway 應用程式

Achedaway APP已經正式發佈。下載該應用程式有兩種方式。

以下為該應用程式的使用說明。

- A** 在蘋果 Apple App Store或 谷歌 Google Play搜索“Achedaway”。

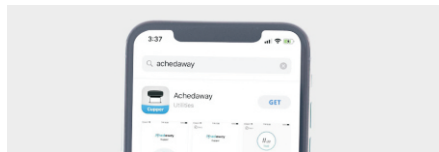


- B** 掃描下方的二維碼下載應用程式。




IOS



Android

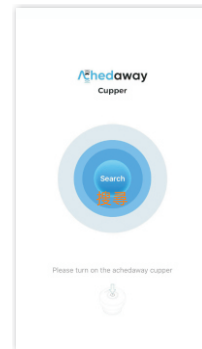


1. 下載好應用程式後，先開啟 Achedaway 智能拔罐按摩器，然後點擊“搜尋(Search)”。

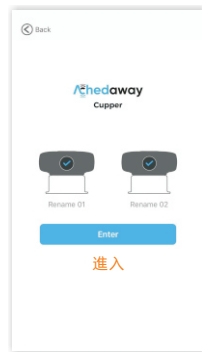


2. 擇選您想連接的拔罐器。如果您有兩個拔罐器，就將兩個都選取。您也可以通過長按“重新命名”，對您的拔罐器重新命名。設置好後，按“進入(Enter)”鍵。



3. 在“設置(Settings)”中，您可以看到上方有一個計時器。計時器會顯示拔罐持續的時間。您也可以調控強度等級、切換不同模式和開關紅光。此外，頁面底部還顯示了電池電量。

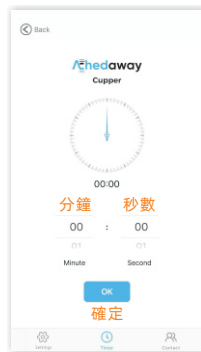


4. 在“計時器(Timer)”上，您可以於1秒到12分鐘之間設置拔罐時間。

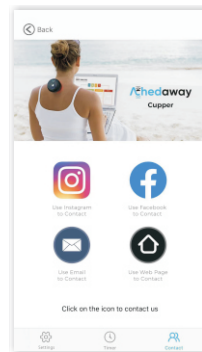

5. 在“聯繫方式(Contact)”上，您可以通過四種方式與我們聯繫。

04 | 充電指南

1. 如需充電，請將Type-C充電線一端連接到充電器，另一端連接到產品上。
2. 充電時間約為2.5小時。充電時充電指示燈為紅色，充滿電時充電指示燈為綠色。由於環境因素，實際充電時間可能有所不同。
3. 保持Type-C充電線介面乾燥、清潔，充電時間不可超過8小時。
4. 本產品在充電時不能使用。
5. 當電池電量過低時，儀器會在發出“嗶嗶”聲10次後自動關機。

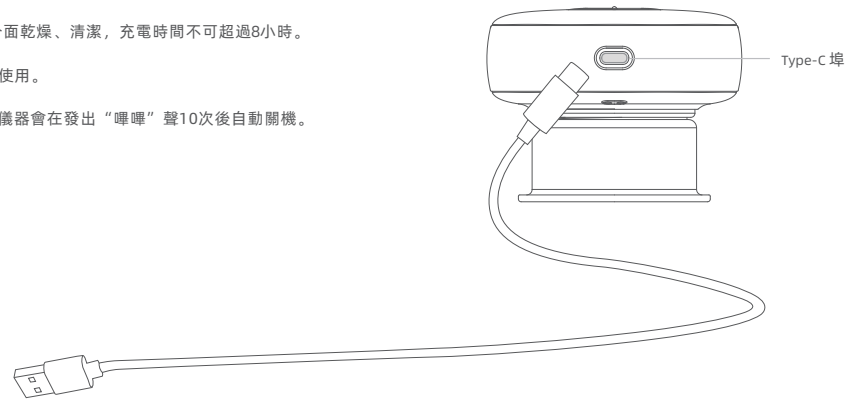


05 | 清潔和維護

請按照指引清潔和維護產品：



- 請勿使用水等液體直接清潔機身。
- 請將產品儲存於安全及乾燥處。
- 閒置時，請勿讓產品上有水分殘留。
- 請勿在易受振動、陽光直射、高溫潮濕、有水、強電磁場或爆炸物等場所使用或存放產品。

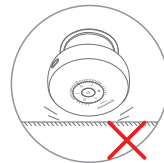

- 用乾燥的無紡布擦拭機身。每次使用後，請關閉儀器才進行清洗。
- 請勿用帶有酸性或鹼性的清潔劑、酒精、稀釋劑、汽油、洗甲水等溶劑清潔機身，請勿使硬毛刷或不銹鋼球清潔機身。

06 | 產品問題和解決方法

產品問題	解決方法
無法開啟儀器	<ol style="list-style-type: none">1. 長按電源按鈕1.5秒以上。2. 給儀器充電2小時後重試。
抽吸力度弱	<ol style="list-style-type: none">1. 重新安裝並擰緊塑膠拔罐杯。2. 檢查進風口是否堵塞。3. 檢查電源按鈕是否無法重置。4. 檢查過濾棉片是否需要更換。
無法充電	<ol style="list-style-type: none">1. 請使用不同的插座重試。2. 拔出適配器，並再次嘗試，確保它連接到位。3. 檢查適配器和充電口是否有污垢或雜物，如有請進行清潔。4. 更換適配器或充電線。

請勿自行拆卸儀器，如問題無法解決請與我們聯繫。

07 | 安全說明

危險 

- 請勿與醫療植入物（如心臟起搏器）、維持生命的醫療電子設備（如人工心臟和肺）、醫療電子儀器（如心電圖機）一起使用。
- 請置於兒童接觸不到的地方。

警告 

- 不要應用於傷口、疤痕或心臟附近的區域。
- 如果出現不適，請停止使用並立即聯繫您的醫療服務提供者。
- 將塑膠拔罐杯均勻地貼合在皮膚上。
- 建議個人使用。若要於他人身上使用，請先關掉儀器，清洗塑膠拔罐杯。
- 避免長時間在身體同一部位使用（儀器使用12分鐘後將自動關閉），以防止出現刺激和皮膚損傷的可能性。
- 請勿在之前使用拔罐後皮膚有瘀傷的同一位置使用。
- 請勿在敏感部位使用，以防止出現意外或身體不適。
- 請勿使用破損或壞掉的塑膠拔罐杯。
- 本產品不能替代醫學治療。
- 本產品含有鋰電池。為防止損壞、爆炸，請勿自行拆卸、改裝、浸入水中或投入火中。

如有下列情況，使用前請先獲得醫生同意：

過敏；傳染病；體溫在38°C以上；用藥期間；對金屬和紅光過敏；心臟、腦神經、血壓紊亂；知覺或皮膚失調；糖尿病或其他疾病所致高水準外周迴圈障礙的感覺障礙；不能自由表達自己的意志；正在接受醫生治療或感覺不適。

有下列情形之一的，禁止使用本產品：

1. 懷孕或在月經週期的女性；
2. 惡性腫瘤或局部損傷潰瘍、外傷性骨折、靜脈曲張、急性化膿性炎症、皮膚彈性喪失患者；
3. 嚴重心臟病、心力衰竭、呼吸衰竭和嚴重水腫；
4. 凝血機制差、自發性出血或損傷後出血的患者；
5. 有嚴重皮膚過敏或皮膚傳染病者；
6. 嚴重神經緊張，高燒，抽搐，痙攣，躁狂不安；
7. 心臟周圍區域，感知器官，私處或身體上的大血管。

注意

請按照說明書使用本產品。

長時間使用後產品發熱是正常現象。

使用本產品後可能出現紅腫或瘀傷，此為正常現象，通常在3天內消散（取決於每個人的皮膚類型）。

- 請勿濕手插拔USB充電線，以防觸電或發生事故。
- 請勿用於兒童或沒有表達能力的人身上，以免發生事故。
- 駕駛時請勿使用本產品。
- 請勿將本品長時間貼在患處，防止皮膚發炎。
- 如果長時間閒置，電池就會耗盡。使用前請按照說明充電。
- 該產品含有電池。當使用壽命結束時，請回收。
- 適合16歲以上的人使用。

08 | 保修聲明

本產品保修期為一年。保修期起始日以產品發票日期為準。一年內因材料或設計缺陷導致產品失效，本公司將免費維修或更換新產品，但以下情況除外：

1. 使用者使用不當或損壞產品。
2. 擅自拆卸和維護產品。
3. 使用非官方提供的配件而造成的損壞。
4. 發票中包含的型號與維修產品的型號不符或已更改。
5. 禮品產品和配件。
6. 超出保修期或未能提供有效發票。
7. 任何撞擊造成的損壞。

09 | 常見問題解答

- 每個位置的建議拔罐時間是多少？
建議每個位置拔3到12分鐘。您還可以使用計時器來紀錄時間。
- 如何在智能拔罐按摩器運行時關閉它？
只要按住開/關鍵便可停止。
- 拔罐痕跡要需多久才會消失？
根據我們的研究，拔罐痕跡通常需要3 - 5天左右的時間才能消散。某些人可能需要更長的時間。

10 | 香港分銷商

Infiniti Healthcare

地址：香港新界屯門杯渡路99號99 COMMONS 2樓 215室

電話：+ 852 2986 6686

傳真：+ 852 2986 6676

Whats app : + 852 6661 2457

Whats app : + 852 6588 9618

電郵： achedaway.hk@infiniti-c.co

網址： www.infiniti-c.co / [achedaway - landing](#)